


Fabriquer une visière de protection covid



Matériel nécessaire

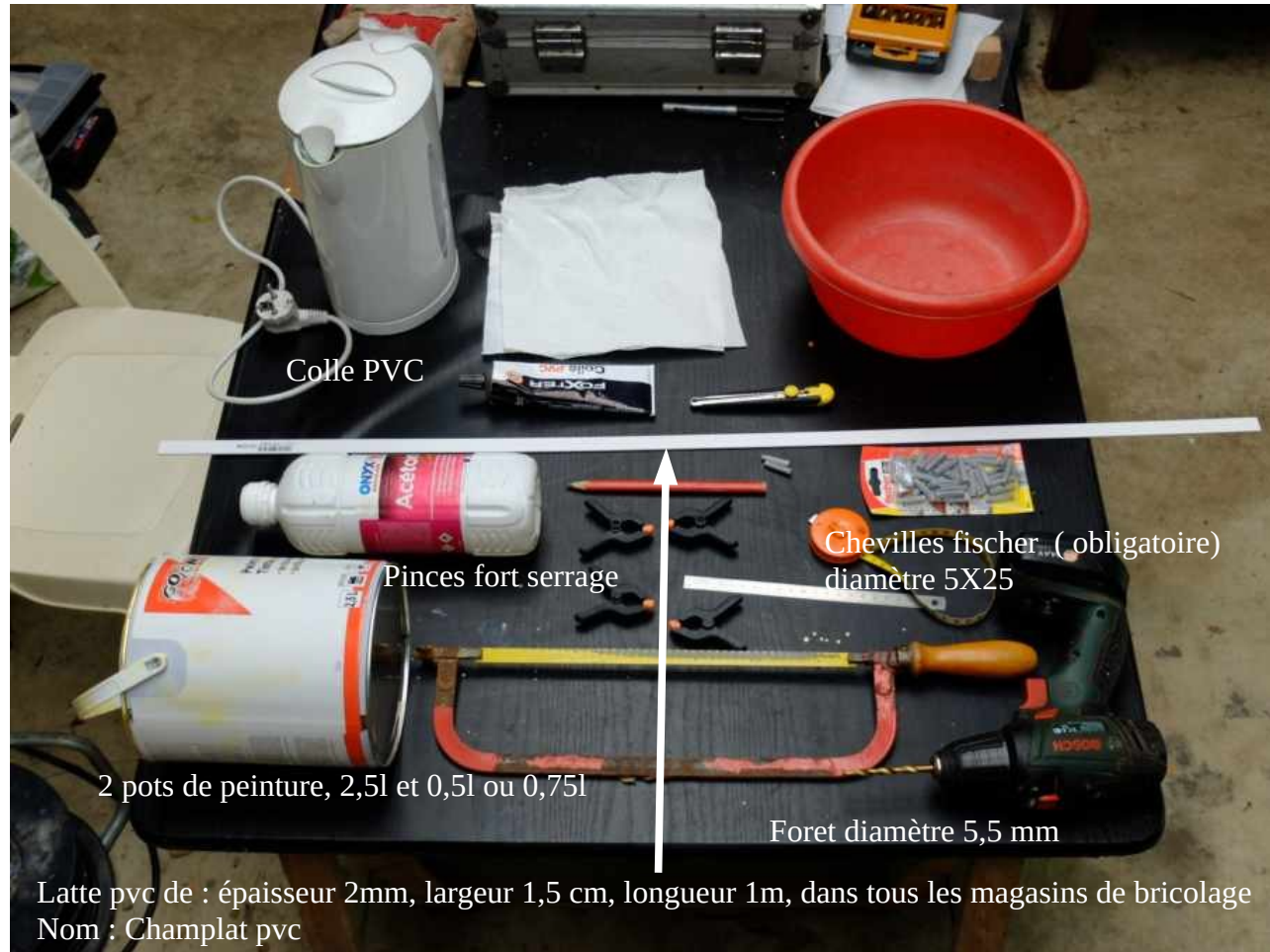


Découper la latte de pvc en 2 morceaux, 61cm et 31 cm



Dimensions et marquages

faire des marques à 5 cm et 18 cm des bouts du grand morceau

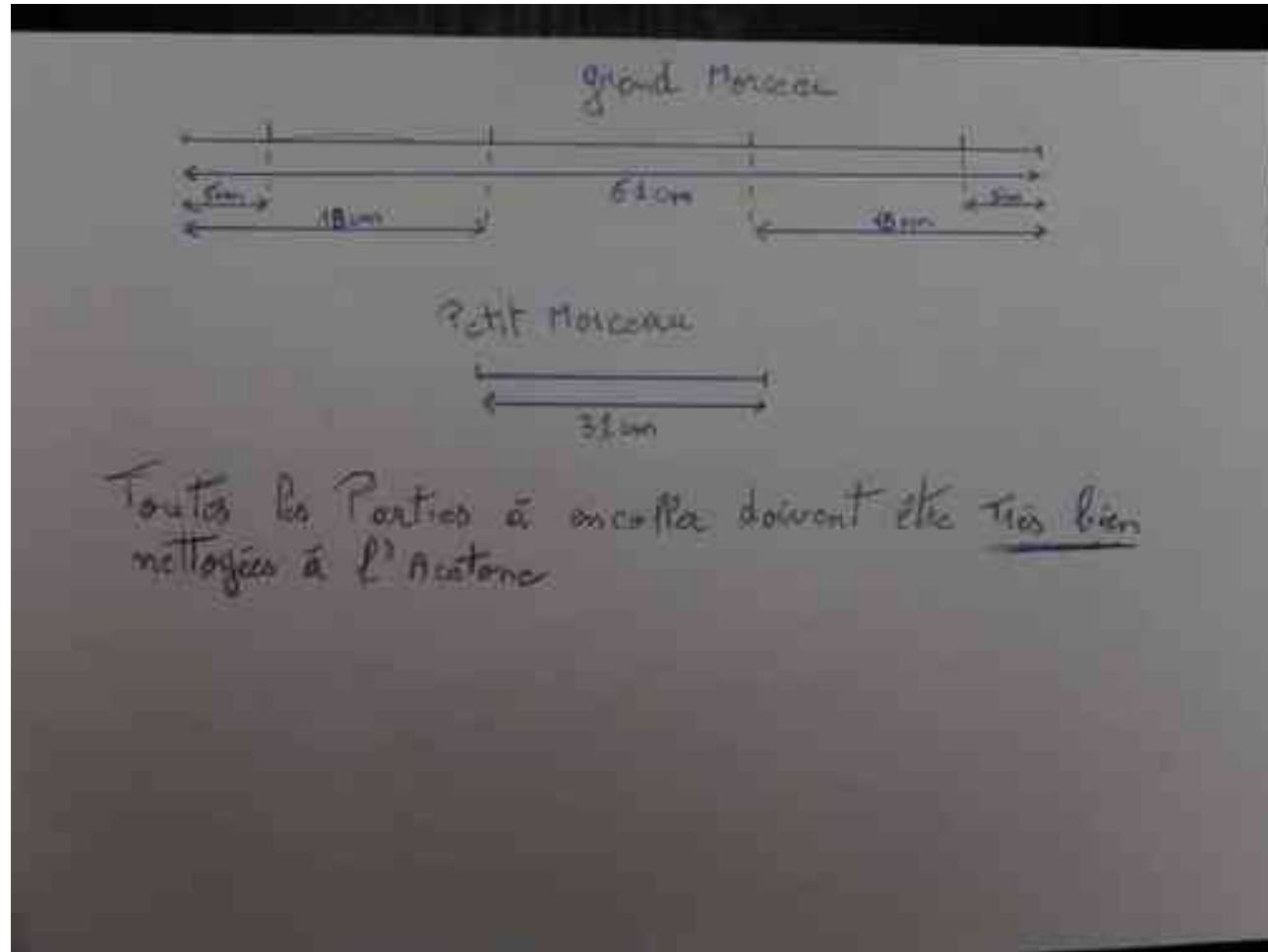

Mettre le petit morceau dans l'eau bouillante durant 1 mn
pour qu'il se ramollisse



Utiliser le pot de peinture de 0,5 l pour courber le pvc, maintenir une minute pour que le pvc refroidisse



Ramollir le grand morceau dans l'eau bouillante



Utiliser le pot de peinture de 2,5l pour courber le pvc





Ramollir l'un des bouts du grand morceau jusqu'au marquage de 5 cm pour le tordre pour faire « un escargot » voir suivant







Positionner de manière centrée sur **le petit bout** de pvc à l'aide de 2 pinces une feuille A4 perforée ou la visière déjà perforée et y marquer au crayon les 4 trous



Marquer avec un cutter le centre des trous afin de percer ultérieurement au centre



Percer les 4 trous avec un foret de diamètre 5,5 mm



Positionner 4 chevilles fischer 5x20 dans les trous, ces chevilles sont particulièrement adaptées car les crans sont présents jusqu'au début de la cheville enfoncez bien à fond, aidez-vous d'une pince éventuellement



Couper les chevilles des extrémités à 2 crans du pcv



Couper les 2 chevilles centrales à 1 cran du pvc



Nettoyer à l'acétone toutes les faces à encoller sur 2 cm sur les 2 bouts de pvc



Encoller toutes les faces avec la colle pvc sur 2 cm




Assembler les 2 bouts de pvc suivant les marque de 18 cm et maintenir avec des pinces durant 2h au moins






Découper en rond les 2 coins du bas de la membrane visièrè
Ces feuilles de plastique peuvent s'acheter dans les boutiques de matériel de bureau par 100, épaisseur 0,250 mm, on peut utiliser des pochettes pour classeur mais c'est trop mou et moins transparent, L'idéal étant le polycarbonate beaucoup plus cher.

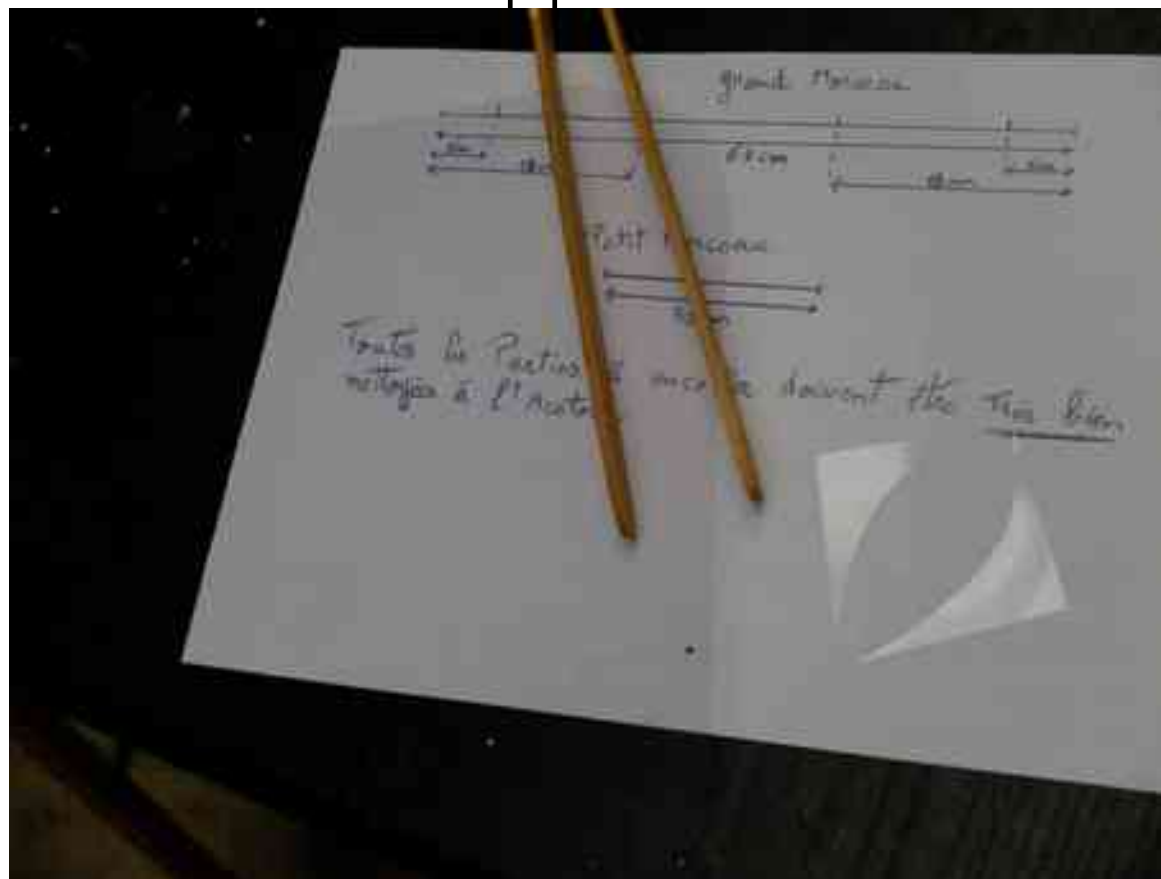

Utiliser une perforatrice pour percer les trous sur la feuille plastique

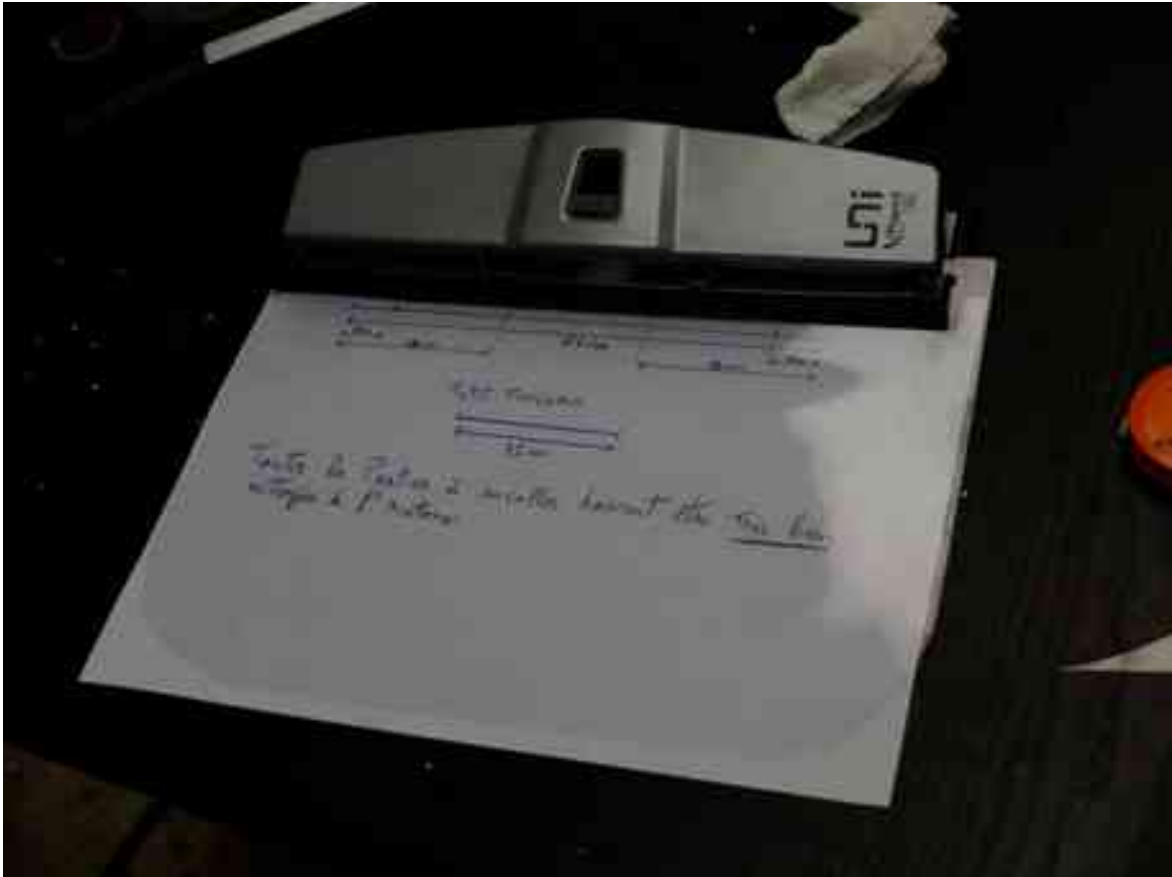

Une fois la colle sèche, assembler en commençant par les chevilles centrales
positionner un élastique entre les 2 « escargots »

